

Hướng Dẫn Sử Dụng

Thiết bị triệt lông Halio IPL



halio

Thiết bị khách hàng, cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này. Xin lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ gìn để tránh hỏng hóc sau này.

Phụ lục

- Ghi chú sản phẩm.....02
- Chỉ số chỉ định.....03
- Quan trọng.....04
- Cảnh báo.....05
- Tổng quan sản phẩm.....06
- Cách thức hoạt động của IPL.....08
- Bảng Màu Da & Màu Tóc.....08
- Lời khuyên cho da nhuộm.....09
- Nhuộm da bằng ánh nắng tự nhiên hoặc nhào tạo.....10
- Nhuộm da bằng kem.....10
- TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.....10
- Xử lý trước làn da.....10
- Kiểm tra các vùng da.....11
- SỬ DỤNG THIẾT BỊ.....11
- Chế độ Stamp Flash (Thủ công) và Slide Flash (Tự động).....14
- Loại trừ triệt lông để nước.....14
- Thời gian triệt lông để nước.....15
- SAU KHI SỬ DỤNG.....15
- Các phản ứng thường gặp trên da.....16
- Chăm sóc sau triệt lông.....16
- Vệ sinh & Bảo quản.....16
- Thông số kỹ thuật.....17
- Bộ sản phẩm đầy đủ.....17

Giới thiệu sản phẩm

Công nghệ Intense Pulsed Light (IPL) được biết đến là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa lông mọc lại liên tục và đã được sử dụng trong các thẩm mỹ viện chuyên nghiệp trong nhiều thập kỷ. Với nhiều năm phát triển, công nghệ này hiện đã có thể sử dụng tại nhà. Thiết bị của chúng tôi nhẹ nhàng và công cụ phóng pháp triệt lông đồng bộ và hiệu quả để cung cấp ánh sáng mà bạn cảm thấy thoải mái. Những sợi lông không mong muốn cuối cùng sẽ không còn nữa. Hãy cùng tìm hướng dẫn các bước để đạt sự mịn màng!

Chỉ số chỉ định

Tham khảo Bảng Màu Da & Màu Tóc trước khi sử dụng thiết bị. Không bao giờ sử dụng thiết bị nếu nó không phù hợp với màu da của bạn. Không bao giờ sử dụng thiết bị nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Không bao giờ sử dụng thiết bị nếu bạn đang được chẩn đoán mắc bất kỳ bệnh nào được liệt kê dưới đây.

- Nếu bạn mắc một trong số bệnh về da như đang điều trị ung thư da, bạn có tiền sử ung thư da hoặc bất kỳ bệnh ung thư khu trú nào khác tại các khu vực cần triệt lông.
- Nếu bạn có các tổn thương trên vùng thủ hoặc nhiều nốt ruồi không điển hình ở những vùng cần triệt lông.
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng collagen, bao gồm tiền sử hình thành sẹo lồi hoặc tiền sử vết thương khô lành.
- Nếu bạn có tiền sử rối loạn mạch máu, chẳng hạn như sự xuất hiện của

- Nếu bạn đang thuốc ức chế miễn dịch.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị trên các khu vực sau đây:
 - Vùng quanh mắt và gần lông mày.
 - Những nơi không được dùng trên cơ thể và vùng da xung quanh, trên vùng da bộ phận sinh dục, khu vực nách nách và bên trong ở mông và tai.
 - Nam giới không được dùng trên vùng da bộ phận sinh dục và vùng da mặt khác.
 - Trên hoặc gần bất kỳ bộ phận nhân tạo như cấy ghép silicon, máy đo nhịp tim, công tắc điện dựa vào sóng điện từ hoặc thiết bị khác có liên quan.
 - Nếu bạn bị tiểu đường, lupus ban đỏ, rối loạn chuyển hóa porphyrin hoặc bệnh tim sung huyết.
 - Nếu bạn có bất kỳ cơ quan cấy máu (như ống đống...)
 - Nếu bạn có tiền sử bệnh về chế miễn dịch bao gồm cả nhiễm HIV hoặc AIDS.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị nếu bạn đang bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê dưới đây:
 - Trên những khu vực bạn sử dụng chất khử mụn lâu dài. Điều này có thể dẫn đến các phản ứng trên da.
 - Không bao giờ sử dụng thiết bị trên vùng da bị chảy nắng, nhuộm da gần đây hoặc nhuộm da tạm thời (phần bôi).
 - Lưu ý: Dùng sản này không đầy đủ. Nếu bạn không chắc chắn về việc sử dụng thiết bị hay không, chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến bác sĩ.

Quan trọng

Giữ thiết bị và bộ chuyển đổi khô ráo. Không sử dụng thiết bị gần nước như trong bồn tắm, bồn rửa mặt, bồn nhà, v.v.

Nếu thiết bị bị hỏng, ngừng chạm vào bất kỳ bộ phận nào bên trong để tránh bị điện giật.

Nếu bạn dùng thuốc chống đông máu - bao gồm cả sử dụng nhiều aspirin và yếu cầu không cho phép vết trầy vết vùng tổn thương da có triệu chứng tuần hoàn bất thường.

03

04

Cảnh báo

Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, tư khu họ được người chăm sóc nhiệm vụ sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không dùng thiết bị.


Thiết bị không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Tham khảo trên từ 16 đến 18 tuổi có thể sử dụng thiết bị với sự đồng ý và / hoặc hỗ trợ của cha mẹ hoặc những người có thẩm quyền như cha mẹ đối với họ. Người lớn từ 18 tuổi trở lên có thể tự sử dụng thiết bị.

Luôn kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng. Không sử dụng thiết bị hoặc bộ chuyển đổi nếu nó bị hỏng. Luôn luôn thay thế một bộ phận bị hư hỏng bằng một trong những thiết bị tương đương như bạn mua. Bộ chuyển đổi có chứa một máy biến áp không cần bộ chuyển đổi để thay thế bằng phần khác, vì điều này gây ra tình huống nguy hiểm. Không sử dụng thiết bị nếu bộ lọc ra cục tìm của cửa sổ thoát ánh sáng bị hỏng.

Để làm sạch thiết bị:

- Dùng bàn chải không có gai trên tuồng không khi đi qua các khe trống góc.
- Không bao giờ để thiết bị bị va đập mạnh, cũng như không rung lắc hoặc rơi.
- Nếu bạn mang thiết bị từ môi trường quá lạnh sang môi trường rất nóng và ngược lại, hãy đợi khoảng 3 giờ trước khi sử dụng.

Tổng quan sản phẩm

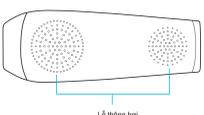

Lỗ thông hơi

05

06

Cửa phát ánh sáng

Nút Hoạt Động

Màn hình LCD

Xung phát sáng còn lại

Mức độ cường độ

Điều chỉnh chế độ

Điện sáng Chế độ tự động

Điện sáng Chế độ tự động

Nút nguồn / Cường độ

Đầu cầm DC

Lỗ thông hơi

Cách Sử Dụng IPL Hoạt Động

Với công nghệ IPL, các xung ánh sáng nhẹ nhàng được đưa vào da và được hấp thụ bởi chân lông. Lông càng sẫm màu thì càng hấp thụ tốt các xung ánh sáng.

Các xung ánh sáng kích thích nang lông chuyển sang giai đoạn nghỉ ngơi. Kết quả là, lông rụng tự nhiên và lông mọc lại bị ngăn chặn, giúp làm da của bạn mịn màng hơn.

Chú ý phát triển của lông bao gồm các giai đoạn khác nhau (bằng trường, chuyển đổi, thoái hoạt). Công nghệ IPL chỉ hiệu quả khi lông đang trong giai đoạn tăng trưởng. Không phải tất cả các sợi lông đều đang trong giai đoạn tăng trưởng cùng một lúc. Đây là lý do tại sao chúng tôi đề xuất lịch triệt lông liên tục để đạt hiệu quả tối đa. Đây là lý do tại sao chúng tôi đề xuất lịch triệt lông liên tục để đạt hiệu quả tối đa. Đây là lý do tại sao chúng tôi đề xuất lịch triệt lông liên tục để đạt hiệu quả tối đa.

Halio này mang thiết bị triệt lông hiệu quả nếu bạn có lông vàng hoe hoặc vàng nhạt, không sử dụng cho lông sẫm màu hoặc lông đen.

Bảng Màu Da & Màu Tóc

	Tường	Hạt	Đen	Nâu nhạt	Nâu	Nâu tối	Nâu đen
Đen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nâu sẫm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nâu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Đen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Đỏ	×	×	×	×	×	×	×
Tím	×	×	×	×	×	×	×
Đỏ	×	×	×	×	×	×	×
Đỏ	×	×	×	×	×	×	×
Đỏ	×	×	×	×	×	×	×
Đỏ	×	×	×	×	×	×	×
Đỏ	×	×	×	×	×	×	×

✓ Không dùng | ✗ Không dùng

Hiệu Quả Kỳ Vọng

Sau lần triệt lông đầu tiên, có thể mất từ 1 đến 3 tuần để lông rụng. Trong những tuần đầu tiên sau lần triệt lông ban đầu, bạn vẫn thấy một số sợi lông mọc lên. Đây có thể là những sợi lông không được giai đoạn tăng trưởng liên tiếp triệt lông đầu tiên.

Sau 3-5 lần triệt lông, bạn sẽ thấy sự giảm mọc đáng kể của lông ở những vùng bạn đã triệt lông bằng thiết bị. Một số lông cũng giảm đi không thấy. Tiếp tục triệt lông bằng cách sử dụng thường xuyên (tới 8 tuần một lần) để duy trì kết quả.

Lời Khuyên Cho Cho Da Nhuộm

Nhuộm Da Bằng Ánh Sáng Tự Nhiên hoặc Nhân Tạo

Việc sử dụng để da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời (không với mức độ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tự nhiên hoặc nhân tạo) sau khi bạn đã triệt lông bằng thiết bị của bạn. Điều này cho phép ánh sáng được hấp thụ tốt bởi các phần lông bên dưới bề mặt da để đảm bảo hiệu quả triệt lông.

- Không sử dụng thiết bị trên các vùng cơ thể bị cháy nắng.

Lưu ý: Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không thường xuyên và gần tiếp xúc không ảnh hưởng đến kết quả.

Nhuộm Da Với Kem

Nếu bạn đã sử dụng kem dưỡng ẩm trước khi triệt lông, hãy đợi cho đến khi kem da nhuộm hoàn toàn được làm sạch khỏi kem nhuộm hoàn toàn trước khi sử dụng thiết bị.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Tiền Xử Lý Làn Da Của Bạn

Trước khi sử dụng thiết bị, bạn nên tẩy tế bào chết của mình bằng cách lau bọt một phần các sợi lông trên bề mặt da. Điều này cho phép ánh sáng được hấp thụ tốt bởi các phần lông bên dưới bề mặt da để đảm bảo hiệu quả triệt lông.

1. Xả y trước các khu vực bạn định sử dụng thiết bị. Bạn có thể cần, cần nghỉ, một lông hoặc tẩy lông (nếu) nhẹ nhàng.
2. Đặt thiết bị lên da và bộ chuyển đổi. Sau đó, lắp bộ trước khi sử dụng thiết bị để da được nghỉ ngơi.
3. Lưu ý không sử dụng các loại kem dưỡng ẩm, mỹ phẩm hoặc các chất gây kích ứng ngay trước khi sử dụng thiết bị.
4. Làm sạch da của bạn và đảm bảo da không có lớp bụi, hoàn toàn khô và không có chất nhờn.
5. Khi lông ngừng phát triển trở lại, thường xảy ra sau 4-5 lần triệt lông, bạn không cần phải xử lý da trước khi sử dụng thiết bị nữa.

Kiểm Tra Một Số Vùng Trên Da





07

08

SỬ DỤNG THIẾT BỊ

1. Trước khi sử dụng, làm sạch da của bạn để loại bỏ bụi bẩn.
2. Đặt thiết bị và bộ chuyển đổi. Sau đó, lắp bộ trước khi sử dụng thiết bị để da được nghỉ ngơi.
3. Nhấn và giữ nút Nguồn / Cường độ để bắt thiết bị. Nhấn nút Nguồn / Cường độ để chọn cường độ ánh sáng phù hợp theo kết quả kiểm tra trên da của bạn.
4. Đảm bảo bảo hộ để ánh sáng bắt chiếu vào một làn da.



5. Đặt thiết bị ở một góc 90° trên da, để có thể thoát ánh sáng được hoàn toàn với da của bạn.
6. Nhấn nút Hoạt động để phát đèn flash.
7. Lưu ý: Bạn sẽ cảm thấy một cảm giác hơi ấm vì ánh sáng đèn flash. Điều này là bình thường.
8. Đặt thiết bị lên khu vực tiếp theo cần được triệt lông, và tiếp tục phát đèn flash.

09

10

Lịch Triệt Lông Được Đề Xuất

Đa của bạn có thể bị đỏ nhẹ và / hoặc cảm giác bị kim châm, ngứa ran hoặc cảm thấy ấm. Phản ứng này hoàn toàn bình thường và sẽ biến mất nhanh chóng. Đa khô và ngứa có thể xảy ra do các hoặc kết hợp giữa cao và triệt lông bằng ánh sáng. Khuyến nghị thoa một ít gel dịu nhẹ để giúp làm dịu da sau khi triệt lông.

1 phút.

1 phút.

4 phút.

14 phút.

8 phút.

SAU KHI SỬ DỤNG

Các phản ứng da thường gặp

Đa của bạn có thể bị đỏ nhẹ và / hoặc cảm giác bị kim châm, ngứa ran hoặc cảm thấy ấm. Phản ứng này hoàn toàn bình thường và sẽ biến mất nhanh chóng. Đa khô và ngứa có thể xảy ra do các hoặc kết hợp giữa cao và triệt lông bằng ánh sáng. Khuyến nghị thoa một ít gel dịu nhẹ để giúp làm dịu da sau khi triệt lông.

Chăm Sóc Sau Khi Triệt Lông

Sau khi sử dụng, bạn có thể thoa kem dưỡng, kem, chất khử mùi, chất làm mềm hoặc mỹ phẩm lên vùng triệt lông. Nếu bạn bị kích ứng da hoặc mẩn đỏ da sau lần triệt lông, hãy đợi cho đến khi nó biến mất trước khi thoa bất kỳ sản phẩm nào lên da. Nếu bạn bị kích ứng sau khi thoa sản phẩm lên da, hãy rửa sạch bằng nước.

Làm Sạch & Bảo Quản

1. Sau khi sử dụng, tắt thiết bị, rút phích cắm và để nguội.
2. Sử dụng khăn mềm ẩm để lau bề mặt của thiết bị.
3. Để khô hoàn toàn tất cả các bộ phận trong không khí.
4. Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo và ít bụi.


Thông Số Kỹ Thuật

Điện áp định mức: AC100 – 240V
Tần suất định mức: 50 / 60Hz
Dòng điện hoạt động: 3A
Nhiệt độ bảo quản: -10 ° C – 50 ° C
Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C – 40 ° C
Độ ẩm hoạt động: 20% – 70%

Bộ Sản Phẩm Đầy Đủ

- 1 * Thiết bị triệt lông IPL tại nhà
- 1 * Bộ chuyển đổi
- 1 * Màn hình LCD
- 1 * Dây sạc lỏng
- 1 * Hướng dẫn sử dụng

Bộ Phần Cơ Thể Có Thể Sử Dụng Máy

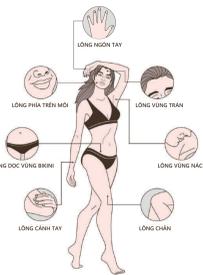

07

08

PANTONE 7605 C

COLOR VALUES:

RGB 225 187 180

HEX/HTML #E1BBB4

CMYK 4 26 16 0

Xin lưu ý rằng các giá trị RGB & Hex / HTML sẽ khác nhau giữa Công cụ tìm màu PANTONE (the PANTONE Color Finder) và Hướng dẫn màu sắc PANTONE (the PANTONE Color Bridge Guides) do các tiêu chuẩn khác nhau cho việc in và sử dụng trên nền tảng kỹ thuật số. Đối với Hướng dẫn màu sắc PANTONE, chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn chiếu sáng M1 để phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp cho quá trình in. Đối với Công cụ tìm màu PANTONE, chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn ánh sáng M2 để căn chỉnh với phần mềm thiết kế thương được sử dụng như Adobe Photoshop.

Lịch Trình Triệt Lông Được Đề Xuất

Đa của bạn có thể bị đỏ nhẹ và / hoặc cảm giác bị kim châm, ngứa ran hoặc cảm thấy ấm. Phản ứng này hoàn toàn bình thường và sẽ biến mất nhanh chóng. Đa khô và ngứa có thể xảy ra do các hoặc kết hợp giữa cao và triệt lông bằng ánh sáng. Khuyến nghị thoa một ít gel dịu nhẹ để giúp làm dịu da sau khi triệt lông.

1 phút.

1 phút.

4 phút.

14 phút.

8 phút.

SAU KHI SỬ DỤNG

Các phản ứng da thường gặp

Đa của bạn có thể bị đỏ nhẹ và / hoặc cảm giác bị kim châm, ngứa ran hoặc cảm thấy ấm. Phản ứng này hoàn toàn bình thường và sẽ biến mất nhanh chóng. Đa khô và ngứa có thể xảy ra do các hoặc kết hợp giữa cao và triệt lông bằng ánh sáng. Khuyến nghị thoa một ít gel dịu nhẹ để giúp làm dịu da sau khi triệt lông.

Chăm Sóc Sau Khi Triệt Lông

Sau khi sử dụng, bạn có thể thoa kem dưỡng, kem, chất khử mùi, chất làm mềm hoặc mỹ phẩm lên vùng triệt lông. Nếu bạn bị kích ứng da hoặc mẩn đỏ da sau lần triệt lông, hãy đợi cho đến khi nó biến mất trước khi thoa bất kỳ sản phẩm nào lên da. Nếu bạn bị kích ứng sau khi thoa sản phẩm lên da, hãy rửa sạch bằng nước.

Làm Sạch & Bảo Quản

1. Sau khi sử dụng, tắt thiết bị, rút phích cắm và để nguội.
2. Sử dụng khăn mềm ẩm để lau bề mặt của thiết bị.
3. Để khô hoàn toàn tất cả các bộ phận trong không khí.
4. Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo và ít bụi.


Thông Số Kỹ Thuật

Điện áp định mức: AC100 – 240V
Tần suất định mức: 50 / 60Hz
Dòng điện hoạt động: 3A
Nhiệt độ bảo quản: -10 ° C – 50 ° C
Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C – 40 ° C
Độ ẩm hoạt động: 20% – 70%

Bộ Sản Phẩm Đầy Đủ

- 1 * Thiết bị triệt lông IPL tại nhà
- 1 * Bộ chuyển đổi
- 1 * Màn hình LCD
- 1 * Dây sạc lỏng
- 1 * Hướng dẫn sử dụng

Bộ Phần Cơ Thể Có Thể Sử Dụng Máy

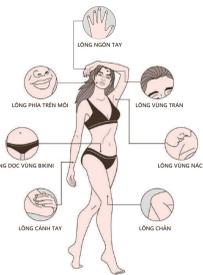

07

08