

halio




halio

MÁY ĐẨY TINH CHẤT DƯỠNG TRẮNG HALIO ION CLEANSING & MOISTURIZING BEAUTY DEVICE

2. Đẩy tinh chất nuôi dưỡng làn da



1. Thoa đều sản phẩm dưỡng da thường dùng lên mặt

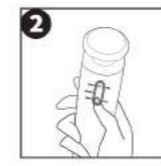

2. Nhấn giữ nút nguồn 3s để khởi động máy và chọn chế độ "Nourish" (Nuôi dưỡng)



3. Cầm thiết bị sao cho tay chạm vào hai thanh kim loại ở hai bên thân máy và di chuyển đều trên bề mặt da hoặc massage theo chuyển động tròn


-7-

3. Làm ấm và dưỡng ẩm cho da (Đắp mặt nạ)



1

Đắp mặt nạ giấy dưỡng ẩm lên mặt

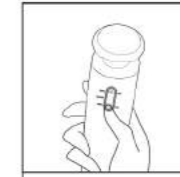

2

Nhấn giữ nút nguồn 3s để khởi động máy và chọn chế độ "Warm" (Làm ấm)



3

Cầm thiết bị sao cho tay chạm vào hai thanh kim loại ở hai bên thân máy và di chuyển đều trên bề mặt da từ dưới lên trên



4

Rửa lại mặt để loại bỏ phần dưỡng chất thừa sau khi kết thúc chu trình

-8-

Cảnh báo

- Không đặt máy trên cửa thoát khí của hệ thống sưởi
- Không đặt máy ở nơi có nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt để tránh làm hỏng máy móc hoặc gây tai nạn
- Chống chỉ định đối với người có cơ địa nhạy cảm (dễ dị ứng), đặc biệt là dị ứng kim loại
- Không sử dụng trên các khu vực: có vết thương hở, gần mắt, phẫu thuật thẩm mỹ, niềng răng hoặc trồng implant
- Vui lòng ngưng sử dụng sản phẩm nếu có bất kỳ dấu hiệu dị ứng nào
- Chống chỉ định cho người có sử dụng máy trợ tim, máy khử rung tim cấy ghép (ICD) và các thiết bị điện tử cấy ghép khác trên cơ thể

-1-

Lưu ý

Máy đẩy tinh chất dưỡng trắng Halio Ion là thiết bị thông minh ứng dụng công nghệ cao nên cần phải được bảo vệ cẩn thận. Các hướng dẫn sau đây tuân thủ theo điều kiện bảo hành và giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm này.

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và dùng sản phẩm một cách chính xác, an toàn
- Không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài hướng dẫn
- Không được tự mình tháo dỡ hoặc sửa đổi máy
- Vui lòng tắt nguồn khi không sử dụng

-2-

Thông số sản phẩm

Tên sản phẩm	Máy đẩy tinh chất dưỡng trắng Halio Ion (Halio Ion Cleansing & Moisturizing Beauty Device)
Pin	3.7V 600 mAh
Tần số rung	8000rpm (±10%)
Nhiệt độ (Chế độ làm ấm)	42°C (±3°C)
Sạc	5V/1A
Kích thước sản phẩm	L47xW37xD153mm
Trọng lượng sản phẩm	185g

-9-

Hướng dẫn khắc phục sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân	Hướng dẫn xử lý
Máy không hoạt động, không sáng đèn	Máy hết pin	Vui lòng sạc máy
Máy không hoạt động dù đã sử dụng đúng cách	Hư dây cáp sạc hoặc bộ phận máy	Vui lòng liên hệ nơi bán mua sản phẩm để được hỗ trợ

Sản phẩm đang hoạt động sẽ tự động tắt sau 10 phút kể từ lần nhấn nút cuối cùng.

Khuyến khích sử dụng hiệu quả

- Lau thiết bị bằng khăn ướt và để khô
- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn để vệ sinh sản phẩm này
- Bảo quản sản phẩm ở khu vực khô ráo sau khi làm sạch
- Sản phẩm này không phải là đồ chơi, vui lòng để xa tầm tay trẻ em dưới 12 tuổi
- Không bảo quản sản phẩm ở nơi quá nóng. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng pin lithium bên trong, làm cong hoặc cháy một số bộ phận bằng nhựa gây giảm tuổi thọ của máy.

-10-

Giới thiệu sản phẩm


Máy đẩy tinh chất dưỡng trắng Halio Ion là thiết bị làm đẹp tiên tiến đa chức năng theo từng bước trong quy trình dưỡng da từ làm sạch bên dưới lỗ chân lông đến đẩy tinh chất sâu vào trong da cho làn da căng mướt, mịn màng. Những làn da khô sạm, bí tắc lỗ chân lông, hấp thụ dưỡng chất kém sẽ cảm thấy sự cải thiện rõ rệt sau khi sử dụng sản phẩm.

Tính năng sản phẩm

- Chế độ làm sạch sâu: nguyên tắc hút và đẩy từ trường của các ion để loại bỏ bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông, làm sáng da, cải thiện các vấn đề về da.
- Chế độ nuôi dưỡng: các ion di chuyển liên tục theo nguyên tắc hút-đẩy mang theo sản phẩm chăm sóc thẩm thấu sâu vào bên trong da, tối ưu hóa hiệu quả hấp thụ dưỡng chất.
- Chế độ làm ấm: việc massage với nhiệt độ ấm giúp cung cấp độ ẩm, thúc đẩy tuần hoàn máu, cho làn da hồng hào, đàn hồi, và tràn đầy sức sống

-3-

Cấu tạo sản phẩm

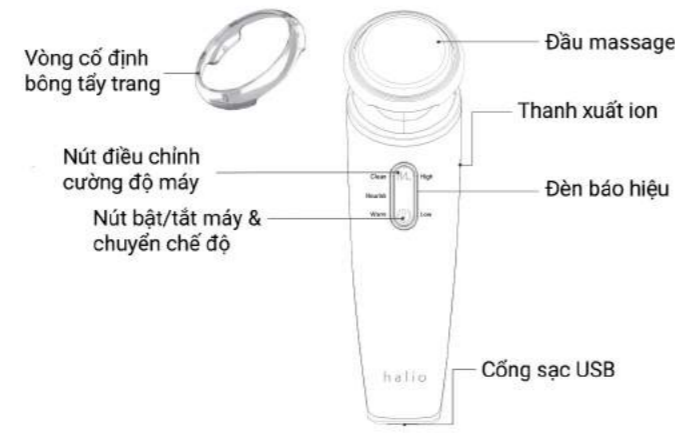

-4-

Chính sách bảo hành

Vui lòng đăng ký đăng ký bảo hành trên website: <https://halio-sonic.com/pages/warranty> sau khi nhận máy và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để sử dụng sản phẩm một cách chính xác.

- Bảo hành miễn phí trong vòng 1 năm kể từ ngày mua nếu sản phẩm bị lỗi hoặc hư hỏng khi đang được sử dụng bình thường theo đúng hướng dẫn;
- Sản phẩm sẽ không được bảo hành nếu sự cố hoặc hư hỏng của sản phẩm do lỗi của người dùng hoặc do không sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn, hoặc hư hỏng do người dùng tự tháo rời sản phẩm để bảo trì hoặc sửa chữa;
- Sản phẩm sẽ không được bảo hành nếu sự cố hoặc hư hỏng do va chạm mạnh, điện áp nguồn cao hoặc thấp và các trường hợp bất khả kháng;
- Những vấn đề không thuộc phạm vi bảo hành sẽ được công ty xem xét theo thực tế tình hình để quyết định việc sửa chữa và bảo trì các bộ phận cùng phí bảo trì.

-11-

Máy đẩy tinh chất dưỡng trắng Halio Ion
(Halio Ion Cleansing & Moisturizing Beauty)
Sản xuất tại Trung Quốc

-12-


Danh mục sản phẩm




-5-

Hướng dẫn sử dụng

1. Làm sạch sâu và sáng da

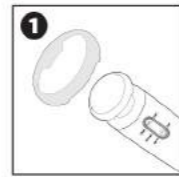


1. Gỡ bỏ vòng nhựa chặn trên mặt kim loại thiết bị

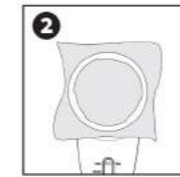


2. Lắp bóng tẩy trang và cố định lại bằng vòng chặn



3. Thoa nước tẩy trang lên mặt bóng

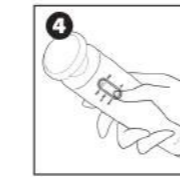

4. Khởi động máy bằng cách nhấn giữ nút nguồn 3 giây

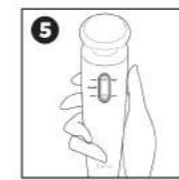

5. Cầm thiết bị sao cho tay chạm vào hai thanh kim loại ở hai bên thân máy



6. Di chuyển máy chậm rãi bằng cách trượt trên mặt theo chuyển động tròn

-6-

-13-

-12-

正

反

备注：双面印刷对折