


**Hướng dẫn sử dụng**  
**Bàn Chải Điện Làm Trắng Răng Halio**  
**Sonic Whitening Electric Toothbrush**  
**PRO White**

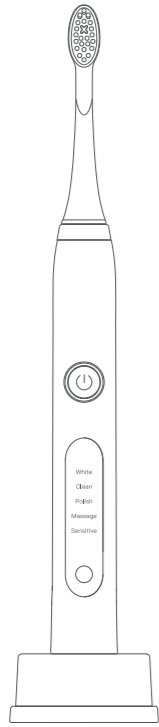


**halio**  
Sonic Whitening Electric Toothbrush

Cảm ơn bạn đã lựa chọn bàn chải đánh răng trắng răng Halio Sonic Pro! Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo sau này.

**Các lưu ý đặc biệt:**


- Vào những lần sử dụng đầu bàn chải điện, nước có thể chảy máu nhẹ và sẽ ngừng chảy sau một vài lần sử dụng. Tình trạng này có thể do bạn đã bị viêm nướu từ trước. Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn sau 2 tuần, vui lòng tham khảo ý kiến của nha sĩ. Nếu răng và nướu của bạn nhạy cảm, Halio khuyến bạn nên sử dụng chế độ "nhạy cảm".
- Không được làm rơi thiết bị hoặc chèn bất kỳ vật lạ khi mở thiết bị.
- Không bao giờ sử dụng sản phẩm nếu máy đã bị rơi, bị hỏng hoặc bộ sạc bị rò rỉ hay bị rơi vào nước. Nếu xảy ra, vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng và gửi lại sản phẩm để kiểm tra và sửa chữa.
- Vui lòng kiểm tra xem điện áp nguồn điện trước khi kết nối với sản phẩm.
- Nếu răng miệng hoặc nướu của bạn đã phẫu thuật hai lần trong tháng, vui lòng tham khảo ý kiến nha sĩ của bạn trước khi sử dụng.
- Sản phẩm này chỉ có thể được sử dụng với đầu bàn chải và bộ sạc Halio.
- Không sử dụng với trẻ em dưới 7 tuổi. Không sử dụng với người có tiền sử bệnh tim mạch
- Không sử dụng để sạc ngoài trời hoặc sạc dưới nhiệt độ cao. Vui lòng cắt nguồn điện khi không sử dụng hoặc trước khi làm sạch. Vui lòng không làm sạch sản phẩm bằng chăm sóc tóc các sản phẩm (chẳng hạn như gel, dầu), xà phòng rửa tay hoặc chất tẩy rửa bằng dung dịch axit

**01 Tên thành phần gồm:**

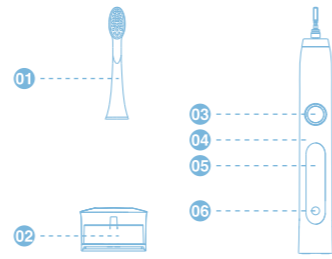

- 01.Đầu bàn chải      04.Tay cầm  
02.Đế sạc không dây      05.Bảng hiển thị chế độ  
03.Nút ấn đa chức năng      06.Đèn báo sạc

**02 Hướng dẫn gắn máy**

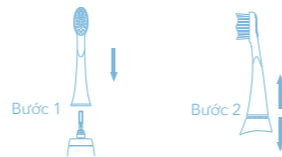

**03 Đặc điểm**

- Công nghệ sóng âm Sonic tần số cao lên tới 31.000 nhíp/phút tạo ra các bọt khí siêu nhỏ với áp lực lớn sẽ đánh bay lượng thức ăn thừa, mảng bám một cách nhanh chóng kể cả các khu vực khó làm sạch như kẽ răng, khoang miệng.
- Với 5 chế độ (làm trắng, làm sạch, đánh bóng, massage, nhạy cảm) để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.

**03 Đặc điểm:**

- Động cơ Maglev có độ bền cao, giảm tiếng ồn, mang đến tính ổn định, mượt mà khi máy rung với cường độ lớn trong thời gian dài hoạt động
- Trang bị tính năng Quadpacer - hẹn giờ thông minh nhắc nhở chuyển vùng đánh răng sau 30s và Smartimer đảm bảo đánh răng đủ thời gian tiêu chuẩn 2 phút theo khuyến cáo của Nha sĩ.
- Bằng cách sử dụng công nghệ chống nước IPX7, sản phẩm có thể được ngâm ở độ sâu 1 mét trong nước trong 30 phút mà không bị rò rỉ, giúp bạn yên tâm sử dụng trong môi trường ẩm ướt, vệ sinh máy dễ dàng.
- Trang bị pin Lithium Ion cao cấp dung lượng 700mAh, lên đến 25 ngày sử dụng chỉ với một lần sạc đầy
- Bàn chải được làm từ sợi Dupont cao cấp, êm ái, thiết kế sóng lượn ôm sát bề mặt răng, làm sạch răng hiệu quả, đầu sợi bọc tròn mềm mại, kháng khuẩn, không gây trầy xước nướu.

**04 Thông số kỹ thuật:**

<b>Tên sản phẩm:</b>	Halio Sonic Pro Toothbrush	<b>Điện áp hoạt động:</b>	C 3,7V
<b>Công suất tải :</b>	3W	<b>Điện áp sạc:</b>	DC 5V -1A
<b>Công suất sạc :</b>	1.5W	<b>Dung lượng pin :</b>	700 mAh
<b>Tiêu chuẩn hoạt động:</b>	GB4706.59-2008	<b>Thời gian sạc :</b>	khoảng 8h

**05 Hướng dẫn sử dụng:**

- Bước 1: Lắp chặt đầu bàn chải vào thân máy.
- Bước 2: Làm ướt đầu bàn chải, lấy kem đánh răng cỡ hạt đầu lên đầu bàn chải
- Bước 3: Giữ nhẹ phím nguồn khoảng 1-2s để khởi động
- Bước 4: Nhấn nhẹ nút nguồn để chọn chức năng phù hợp. Bạn có thể chọn các chế độ khác nhau từ các chế độ sau:

**05 Hướng dẫn sử dụng:**

- White : Làm răng trắng sáng hơn trong vòng 2 tuần đầu sử dụng
  - Clean : Làm sạch cơ bản, chải sạch các mảng bám cứng đầu trong từng kẽ răng, giúp làm sạch khoang miệng
  - Polish : Sử dụng 1-2 lần/tuần giúp răng khỏe, trắng bóng cho một nụ cười tươi sáng
  - Massage : Sử dụng 1 - 2 lần/tuần mát-xa nướu, giảm các bệnh tụt lợi, chảy máu chân răng
  - Sensitive : Dành cho răng, nướu nhạy cảm hoặc lần đầu sử dụng bàn chải điện, làm sạch răng nhẹ nhàng, êm dịu cho nướu
- Bước 5: Chia hàm răng thành góc phần tư trên, dưới, phải, trái, giữ bàn chải ở một góc 45 độ với đường viền nướu, nhẹ nhàng di chuyển từ bề mặt ngoài rồi đi sâu vào vào bề mặt trong răng. Cứ sau 30s máy sẽ ngắt khoảng 0.5-1s để nhắc chuyển khu vực chải răng. Sau 2 phút máy sẽ tự động tắt
- Bước 6: Súc miệng lại với nước sạch
- Bước 7: Tháo đầu bàn chải, vệ sinh lại bằng nước sạch, để tại nơi khô ráo

**06 Hướng dẫn bảo quản :**

- Đầu bàn chải
  - Sau khi đánh răng, rửa sạch đầu bàn chải của bạn dưới vòi nước. Sau đó, tắt và tháo đầu bàn chải.
  - Không bóp hoặc kéo lông bàn chải để tránh làm mất hình dạng.
  - Nên thay đầu bàn chải đánh răng ba tháng một lần, vì lông bàn chải sẽ trở nên thô cứng tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.
- Thân máy
  - Lấy đầu cọ ra khỏi thân máy, dùng khăn mềm ướt lau toàn bộ bề mặt và để khô trong không khí.
  - Để sạc
    - Sử dụng khăn ướt mềm để lau để sạch và để khô trong không khí.
    - Không rửa trực tiếp để sạc dưới nước

**07 Hướng dẫn sạc pin:**

- Bàn chải điện Halio Sonic Pro sử dụng sạc cảm ứng; bạn chỉ cần đặt bàn chải đánh răng lên để sạc đã được kết nối nguồn điện và bàn chải Halio sẽ được sạc lại.
- Đèn LED sáng khi sạc. Thời gian sạc pin:
  - Lần đầu sạc tối đa 16 tiếng
  - Những lần sạc sau từ 4-5 tiếng, máy báo đầy pin là có thể rút sạc
  - Không sạc pin qua đêm, không sạc nhồi

**08 Hướng dẫn khắc phục sự cố:**

Vấn đề	Nguyên nhân	Hướng dẫn xử lý
Độ rung trở nên yếu đi	Ép lông bàn chải quá mạnh vào răng.	Nhẹ nhàng đưa đầu bàn chải lên răng.
Thời gian sử dụng ngắn	Tay cầm không đúng vị trí gây ra lỗi sạc. Pin không được sạc đúng cách.	Đảm bảo đặt đúng cách khi sạc. Kéo dài thời gian sạc.
Sản phẩm không hoạt động	Kiểm tra xem sản phẩm đã được sạc đầy chưa.	Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Halio để giải quyết.

**09 Vấn đề môi trường:**

Không bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt chung. Vui lòng bỏ sản phẩm vào thùng rác tái chế của chính phủ chỉ định.