


halio

Advanced Innovation for Exceptional Care



Chỉ dành riêng cho là chức năng Chăm sóc răng miệng toàn diện chỉ trong 1 phút/ngày với máy làm nước Halo UltraClean để tận hưởng hàm răng trắng sáng, cải thiện sức khỏe nước răng. Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn. Máy có đồng nghĩa Halo UltraClean sẽ làm sạch răng. Thiết bị có thể lắp vào vòi làm đến 1800 lần/phút, áp lực nước mạnh từ 60-120psi cùng với vòi phun 3M0 " độ - Máy làm nước Halo UltraClean đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu làm sạch răng miệng của bạn.

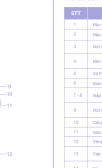

Mô tả sản phẩm

STT	TÊN	CHỨC NĂNG
1	Đầu vòi Halo Ultra Clean	Phun tia nước
2	Đầu phun Halo Ultra Clean	Đưa sát lại các khoảng trống kẽ răng và làm sạch răng miệng
3	Hạt nhân nguyên tử	Thiết kế trong một khoảng thời gian để thay đổi chế độ phun
4	Điện báo chế độ	Khi chạm vào chế độ khác nhau, đèn báo sẽ hiện thị chế độ đang dùng
5	Bật PIN	Đèn sẽ nhấp nháy PIN yếu
6	Đèn báo nước	Lưu trữ lượng nước
7-8	Hộp bộ sạc và vòng pin	Ngăn chặn nước tràn ra bên ngoài
9	Hộp chế độ phun	Để chọn lập và nhớ chế độ phun cho lần nhấn nút
10	Cổng sạc Type - C	Khi nối thiết bị sạc
11	Thước cao su mềm	Để dùng miệng theo
12	Vòng pin của thiết bị	Chạy ngắn chặn nước tràn ra ngoài
13	Cáp sạc Type - C	Khi nối thiết bị với dây sạc để sạc pin
14	Đệm bảo quản vòi phun	Bảo quản an toàn và vệ sinh cho các đầu phun được thay thế

Thông số kỹ thuật:

Kiểu dáng	Máy làm nước chăm sóc răng miệng Halo UltraClean Oral Irrigator - Peristaltic
Kích thước khi sản xuất sử dụng	84*87*224mm (không bao gồm chiều sâu của đầu phun)
Kích thước khi tháo rời dạng	84*87*134mm (không bao gồm chiều sâu của đầu phun)
Dung tích của bình chứa nước	160ml
Áp lực tia nước	60 ~ 120 psi
Tần số rung động	1400 lần - 1800 lần / phút
Đường kính vòi phun	3.68mm
Chế độ làm sạch	Tiêu chuẩn (Standard) - Ấn nhẹ (Soft) - Rửa (Pulse)
Dạng loại PIN	USB-C
Điện áp sạc	Type - C
Chứng nhận nước	Công nghệ IPX7
Thời gian sử dụng PIN	Không vì làm sử dụng (chỉ độ ấn nhẹ (Soft), 1 phút cho mỗi lần sử dụng)
Sản phẩm này bao gồm	Máy làm nước Halo UltraClean Oral Irrigator Hộp đầu phun - 3 đầu phun thay thế Hướng dẫn sử dụng Dây sạc USB-C

Hướng dẫn sạc:

Một đầu của cáp sạc được kết nối với cổng Type - C ở mặt bên của máy làm nước Halo UltraClean Oral Irrigator và đầu USB được cắm vào củ sạc 5V - 1A (tự cung cấp).
Đệm nền sạc thiết bị hơn 5 tiếng để sử dụng trong những trường hợp sau:
(1) Trước khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên
(2) Khi sản phẩm không được sử dụng trong hơn 3 tháng
(3) Khi sản phẩm ngừng hoạt động khi đang sử dụng

- Khi đèn báo PIN nhấp nháy, đó là tín hiệu cảnh báo PIN yếu.
- Không những chỉ hai đầu sạc Type - C của thiết bị vào bất cứ dạng dịch nào
- Đảm bảo rằng đầu sạc Type - C luôn được khóa vào, lau sạch cổng sạc trước khi kết nối nguồn điện.
- Cắm dây cáp sạc vào cổng sạc Type - C của máy làm nước Halo UltraClean Oral Irrigator và cắm đầu sạc USB vào bộ chuyển đổi nguồn 5V /Cả sạc của điện thoại hoặc dây sạc máy tính.
- Sau khi được sạc đầy, đèn báo PIN của máy sẽ sáng lên.
- Sau khi sạc PIN ở chế độ Ấn nhẹ (Soft), sản phẩm có thể được sử dụng trong 90 phút
- Sau khi sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ phòng, trong khoảng từ 0°C-35°C

Hướng dẫn sử dụng:

- Điều chỉnh vòi phun, lắp vòi phun vào máy cho đến khi bạn có thể nghe thấy tiếng "tách".
- Mở nắp bình chứa nước và đổ đầy nước vào bình chứa.
- Đậy nắp lại.
- Đặt vòi phun theo đường viền nước giữa hai răng và khép lại mỗi phía theo hướng vòm để tránh bị với phun bắn vào.
- Nhấn nhẹ nút nguồn và đèn LED sẽ sáng lên, sản phẩm sẵn sàng hoạt động (Tắt chế độ Ấn nhẹ / Rửa).
- Chỉ chuyển đầu vòi phun đặc theo các đường viền của nước và lặp lại các thao tác này cho tất cả các kẽ răng, bao gồm cả các khe phía sau răng.

***Đổ nước vào bình chứa nước của thiết bị.**



Vệ sinh và bảo dưỡng:

Để công thức và nồng độ của một số chất tẩy rửa nhất định sẽ làm hỏng máy làm nước Halo UltraClean Oral Irrigator, vui lòng không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào để vệ sinh thiết bị này.
(1) Nhấn và giữ nút mở đầu phun để tháo đầu phun ra khỏi thân máy, rửa sạch đầu phun sau mỗi lần sử dụng để loại bỏ cặn bẩn.
(2) Tháo thiết bị thành khối bằng cách rửa và sử dụng khăn mềm / bàn chải để làm sạch bên trong bình chứa nước và bề mặt của thiết bị.

* **Mặc bạn không sử dụng sản phẩm này trong thời gian dài, vui lòng thực hiện theo các bước vệ sinh trên để làm sạch sản phẩm, sau đó bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo.**



Hướng dẫn và lưu ý khi vệ sinh và bảo dưỡng:
Khi sản phẩm này hết tuổi thọ sử dụng, theo luật lệ quy định, có thể phải tháo pin bên trong để tái chế và xử lý đúng cách. Nếu bạn không thể tháo pin, vui lòng mang sản phẩm đến trung tâm tái chế do chính phủ chỉ định.

Khắc phục sự cố:

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
Máy không hoạt động	• Sản phẩm bạn mới mua • Hoặc có không sử dụng loại 3 thông	• Đọc lần lại trong 3 tiếng sau đây này • Lắp lại vòi bộ phận chứa vào khách hàng
Sau mỗi lần sạc thiết bị và hoạt động trong vài phút	• Thời gian sạc không đủ • Pin đã hết tuổi thọ	• Sạc liên tục trong 3 tiếng, lắp đầy máy • Lau lại vòi bộ phận chứa vào khách hàng
Áp lực nước yếu	• Đặt bất đảm vào vòi phun • Lắp đúng đầu vòi phun • Lắp bên trong máy bơm	• Thay vòi phun • Lắp lại bộ phận chứa vào khách hàng
Không có nước	• Không có nước trong bình chứa • Các nguyên nhân bị quá tải khi đang thiết bị • Ống nước không được lắp đúng cách • Đặt bất đảm ở trong ống dẫn nước	• Đổ đầy nước vào bình chứa • Dùng bóng rửa khi có dùng • Lắp lại ống dẫn • Lắp lại bộ phận chứa vào khách hàng

Các vấn đề an toàn quan trọng:

- Khi sử dụng các sản phẩm điện tử, hãy luôn bảo vệ thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản sau đây.
- Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng sản phẩm này trước khi sử dụng.
- Để tránh bị thương, vui lòng không tự ý tháo rời sản phẩm này, và không đổ nước nóng hoặc đang đun không được sử dụng ngay vào bình chứa nước.
- Không đặt hoặc nhét vật lạ vào bất kỳ khe hở nào
- Không sử dụng máy rửa răng hoặc bộ vệ sinh răng miệng này cho trẻ em dưới 6 tuổi của sản phẩm này.
- Theo khuyến nghị của nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm này hoặc bất kỳ dụng cụ hỗ trợ vệ sinh răng miệng nào khác.
- Sản phẩm này là sản phẩm có nhân. Bạn chỉ có thể sử dụng sản phẩm này cho mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Thông tin hoặc số chất của hóa chất không được sử dụng thiết bị này cho nhiều bệnh khác.

Dịch vụ và chính sách bảo hành 1 năm

Chính sách bảo hành này chỉ áp dụng cho người dùng bán lẻ của máy làm nước Halo UltraClean Oral Irrigator, và không áp dụng cho các trường hợp chuyển nhượng sản phẩm. Halo đảm bảo rằng máy làm nước Halo UltraClean Oral Irrigator không xảy ra vấn đề về chất liệu và kỹ thuật trong điều kiện sử dụng bình thường trong vòng 1 năm kể từ ngày mua. Vui lòng giữ lại các hóa đơn mua hàng gốc để được hỗ trợ và điều khoản bảo hành. Chính sách này không bao gồm chi phí vận chuyển hoặc xử lý các bộ phận thay thế khác.

Sản phẩm này không phải là đồ chơi, vui lòng để tránh xa tầm tay của trẻ em.

Để tránh bị thương, vui lòng không trực tiếp áp vào phần dưới lưỡi, tai và mắt, mũi hoặc các bộ phận nhạy cảm khác.

Nếu như bị chảy máu nhiều sau khi sử dụng sản phẩm này hoặc nếu vẫn chảy máu sau 2 tuần sử dụng, vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Nếu bạn có một phần thiết bị đang rỉ nước hoặc nước và bị các vấn đề răng miệng sai lệch hoặc đã điều trị (như phẫu thuật răng miệng trong hai tháng sau hoặc gặp các vấn đề nghiêm trọng) hoặc phẫu thuật điều trị răng miệng (điền răng, niềng răng, v.v.), vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này.

Nếu bạn có vấn đề về sức khỏe, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên môn trước khi sử dụng sản phẩm này.

Nếu máy làm nước Halo UltraClean Oral Irrigator của bạn xảy ra lỗi trong khoảng thời gian bảo hành, vui lòng truy cập trang web Halo tại <http://www.halo-usa.com> để biết thông tin bảo hành. Bất kỳ nỗ lực nào để sửa chữa hoặc bảo dưỡng sản phẩm này của bạn sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.